

Respireo SOFT Baby

Para acompañar desde su primer aliento



Desarrollado en colaboración con neumólogos fisioterapeutas y pediátricos, Respireo SOFT Baby es una mascarilla para los bebés de 3 a 12 kg.

Los bebés tienen formas faciales muy diferentes a los adultos: en particular con una frente prominente, el puente nasal no está definido y una estructura ósea en crecimiento y frágil. Todas las características de la mascarilla responden a estas necesidades.


El cuerpo compuesto **íntegramente de silicona flexible**, garantiza una distribución homogénea y atenuada de los puntos de apoyo sobre el rostro, adaptándose perfectamente al perfil del niño. El arnés ha sido especialmente diseñado para no apretar.

Los cinco puntos de fijación proporcionan **estabilidad y la estanqueidad a la mascarilla** con ajustes flexibles.

Por último, para adaptarse a los rostros más exigentes (frentes muy abombadas, malformaciones, etc.), **la mascarilla puede personalizarse** en una configuración sin apoyo frontal.



Respiroo **SOFT** Baby

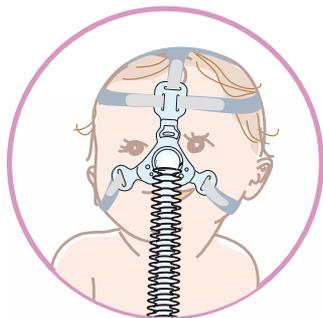

Arnés de 5 puntos

Las amplias tiras y la presencia de un quinto punto de fijación a nivel frontal permiten repartir de forma homogénea los puntos de apoyo sobre la cabeza. La estabilidad de la mascarilla está garantizada cualquiera que sea la posición del bebé.

Sistema difusor de ventilación silencioso

Puerto externo

Para facilitar el tratamiento hospitalario (aporte de oxígeno, medición de CO₂, etc.).

Blanda burbuja

Con un labio único y delgado para garantizar tanto la estanqueidad del aire y una presión mínima en la cara.

Tubo giratorio y flexible en 360°

Para un total sensación de libertad de movimientos.



También disponible en versión sin fuga



Referencias

Respiroo SOFT Baby XS	KM225300
Respiroo SOFT Baby S	KM225400
Arnés Respiroo SOFT Baby XS	KM225500
Arnés Respiroo SOFT Baby S	KM225600
Respiroo SOFT Baby NV XS	KM227300
Respiroo SOFT Baby NV S	KM227400
Tubo con fuga (x10)	KM228000
Tubo sin fuga (x10)	KM228100

Mascarilla esterilizada y desinfectada hasta 12 ciclos. Entre cada paciente, asegúrese cambiar el arnés y el circuito (desinfección térmica y autoclave). Para tener más información por favor contacte el representante comercial (protocolo, etc.).



Por favor lea las instrucciones de uso.
Medical device class IIa, CE0051.

Fabricado por Air Liquide Medical Systems Spa. Distribuido por Air Liquide Medical Systems SA.